


INSTRUCCIONES A LOS VETERINARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE LAS TARJETAS DE SANGRE

Tal y como se ha informado, el Libro Genealógico está configurando un banco de sangre que permita realizar en el futuro estudios genéticos de enfermedades de transmisión hereditaria, determinaciones genéticas de capas, etc.

La toma de muestra sanguínea se realizará siguiendo el procedimiento que se explica a continuación, en tarjetas de toma de muestra diseñadas al efecto. Las tarjetas de toma de muestra se suministrarán desde España a la asociación internacional que actúe como entidad colaboradora, siendo esta asociación la responsable de suministrarlas posteriormente a los veterinarios.

Por ello, cuando el veterinario realice una extracción de sangre (bien sea en una inscripción, una valoración, una extracción a los padres de los potros, etc, etc) deben preparar 2 tarjetas de sangre iguales para cada animal.

Las tarjetas tienen el siguiente aspecto:

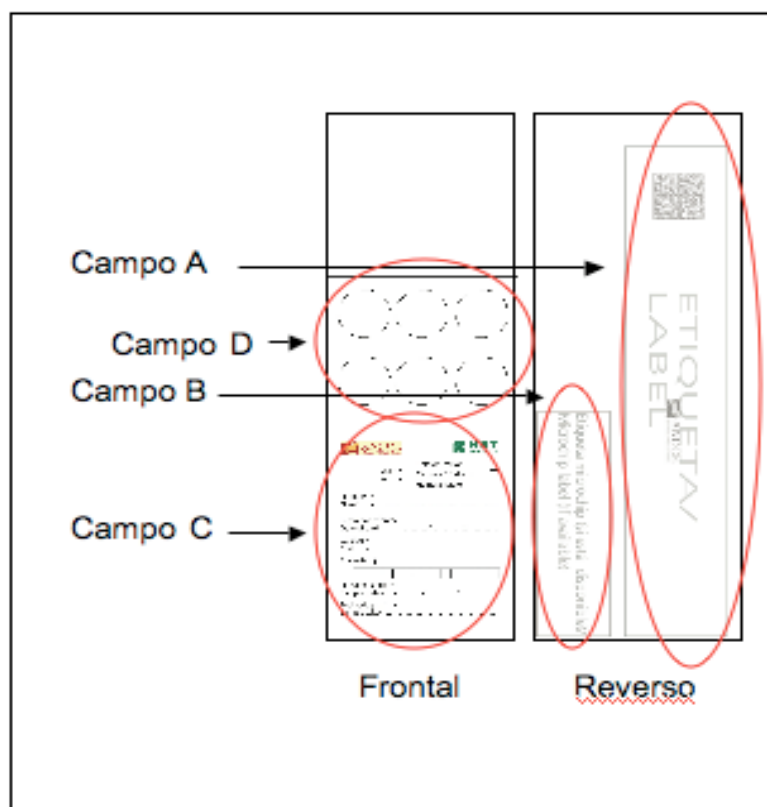

Esquema de las tarjetas de almacenamiento de sangre. Los campos A, B y C son para la identificación de la muestra y el D para la recogida de sangre.

PROTOCOLO DE TRABAJO

Cumplimentar los Datos Identificativos de la tarjeta EN LOS CAMPOS A, B y C:

EN EL REVERSO DE LA TARJETA

En el Campo A (reverso de la tarjeta), se debe pegar la **pegatina con los datos del animal y de la analítica** que va a imprimir a tal efecto el programa informático. Esta pegatina será la “Destinada al laboratorio”. En caso de no disponer de esta pegatina será importantísimo rellenar completamente el campo C.

En el Campo B (reverso de la tarjeta), se debe pegar una **pegatina de microchip**, en aquellos casos que se disponga de ella (es decir, en inscripciones casi siempre se tendrá, no así en el resto de casos).

EN EL FRONTAL DE LA TARJETA

El Campo C (frontal de la tarjeta), se debe rellenar con letra mayúscula y clara. El apartado del microchip solo es necesario que se rellene en los casos que no se disponga de pegatina para pegar en el campo B.

Depositar las muestras de sangre EN EL CAMPO D:

Una vez cumplimentado los datos de todos los campos anteriormente explicados, depositar la tarjeta sobre una superficie horizontal.

Una vez realizada la extracción de sangre, se deben depositar cuatro gotas de sangre en la zona central de cada uno de los seis círculos (se recomienda trabajar con agujas 21G (0.8 mm de diámetro). También se pueden utilizar pipetas para depositar la sangre en los círculos de las tarjetas.

Es muy importante que la tarjeta esté completamente seca antes de introducirla en las bolsas.

Doblar la pestaña, introducir la tarjeta en la bolsa y enviarlas a la asociación correspondiente que actúa como entidad colaboradora del Libro Genealógico en cada país.